

Resultados Consistentes

com Agitação de
Rotação Eficiente

Imagens meramente ilustrativas



Agitador de
Rotação Digital

AGROT

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA


Homogeneizador com rotação em 360°. Possui plataforma que gira circularmente, garantindo perfeita homogeneização das amostras armazenadas em tubos. Mantém as soluções em suspensão homogênea, permitindo lavar precipitados, preparar suspensões e dissolver as amostras que reagem lentamente. Próprio para mistura de sangue, urina, entre outros.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



MOTOR

- ✓ Estrutura compacta e motor selado, sem manutenção e sem ruído

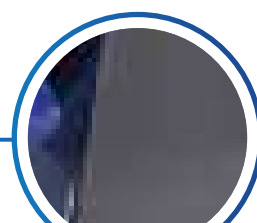

SISTEMA CONTROLE DE VOLTAGEM



DISPLAY LCD

- ✓ Exibe a velocidade atual, tempo e o tipo de operação



PRECISÃO DIGITAL

- ✓ Tempo e velocidade, de fácil configuração



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÉTODO DE OPERAÇÃO	Rotação reversa de 360°
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO	38° Fixo
VELOCIDADE	5 ~ 35rpm
MODO DE FINANCIAMENTO	Temporizado / Contínuo
DIÂMETRO DA PLATAFORMA	Ø30mm
TENSÃO	Bivolt
POTÊNCIA	10W
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP43
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	23x30x39cm
PESO	4,3kg

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

(Acessórios vendidos separadamente. Somente o clip, não acompanha a plataforma).



AGROT-1213

Clip pequeno, para 24 tubos com Ø12/13mm, de 5ml.



AGROT-50

Clip grande para 12 tubos de 50ml.



AGROT-1015

Clip médio para 24 tubos com Ø16mm, de 10/15ml.



AGROT-89

Clip extra pequeno para 24 tubos com Ø8/9mm, de 1,5/2ml.



CONFIRA O VÍDEO DO AGROT



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Homogeneizador digital de rotação;
- ✓ 1 Plataforma;
- ✓ 24 Clips para tubos de 5mL (12/13mm);

- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

