

# Precisão em Laboratório

Centrífugas para  
Resultados Confiáveis



**ROTOR COM 12 CAÇAPAS DE 10ML**

Possibilidade de uso com 6 tubos de 15ml

**Centrífuga Digital  
DT-4000-12-BI**

 IONLAB

 DAIKI CENTRÍFUGAS

# APRESENTAÇÃO

O modelo DT-4000-12 possui display em LCD para visualização da velocidade ou RCF, tempo da centrifugação e programação de aceleração e desaceleração. Motor de indução (sem escova de carbono), que evita a poluição por poeira de carbono, com baixa vibração e baixo ruído. Com trava que não permite o funcionamento com a tampa aberta e alarme ao término do processo.



## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrifuga DT-4000;
- ✓ 1 Rotor DT-214 e 12 caçapas de 10ml;
- ✓ 2 Fusíveis;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.



CONFIRA O VÍDEO DA DT-4000-12-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



**ALARME SONORO**



**SEGURANÇA**

- ✓ Tampa com trava que não permite o funcionamento com a tampa aberta



**CAPACIDADE**

- ✓ Rotor com 12 caçapas de 10ml, possibilidade de uso com 6 tubos de 15ml



**DISPLAY LCD**


Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| VELOCIDADE             | 100 ~ 4000rpm (ajustável) |
| INCREMENTO             | de 10 em 10rpm            |
| TELA                   | LCD                       |
| FORÇA (RCF)            | 0 ~ 1780xg (ajustável)    |
| TIMER                  | 0 ~ 99 minutos            |
| PRECISÃO DA VELOCIDADE | ± 10rpm                   |
| RUÍDO                  | ≤ 60dB                    |
| PESO                   | 6kg                       |
| TENSÃO / FREQUÊNCIA    | Bivolt / 60Hz             |
| DIMENSÕES (LxCxA)      | 31 x 26 x 22cm            |

## ROTORES DISPONÍVEIS

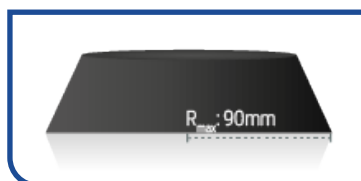

### ROTOR DT-214

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Rotor:          | Ângulo Fixo (45°)  |
| Velocidade Máx: | 4000rpm            |
| Capacidade:     | 12x10ml / 12x15ml* |

Opcionalmente pode ser utilizado com 6 tubos falcon de 15 ml.

\*Esse equipamento possui adaptadores de tubos de 7ml, 5ml ou 4ml. Acessórios vendidos separadamente.

Rotores são vendidos separadamente.  
Modelos sujeitos a alterações.

Outros Rotores e Adaptadores  
disponíveis sob consulta.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

