

Maximize a Eficiência

Descubra Nossas Câmaras de Contagem

Imagens meramente ilustrativas



Câmaras de Contagem
SÉRIE OG

 IONLAB




CÂMARA DE NEUBAUER

As Câmaras de Neubauer são utilizadas para determinar a quantidade de células e outras partículas em suspensão de diferentes tipos de amostras, como sangue e urina.

OG-100

Câmara de Neubauer melhorada


Modelo:	OG-100
Fabricação	Vidro óptico especial
Divisões	Gravadas no revestimento
Quadriculado	0,0025mm ²
Profundidade	0,1mm

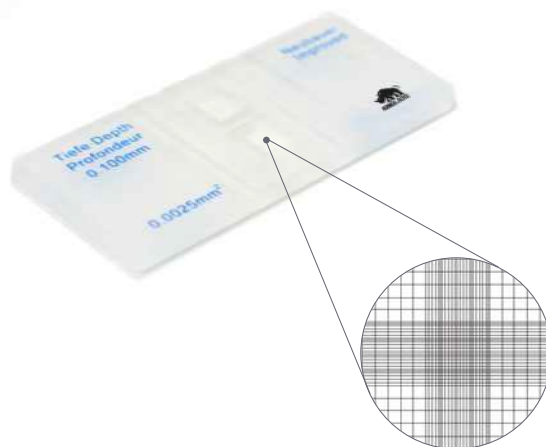

OG-100

Câmara de Neubauer melhorada e espelhada

Modelo:	OG-200
Fabricação	Vidro óptico especial
Divisões	Revestidas com ródio
Quadriculado	0,0025mm ²
Profundidade	0,1mm

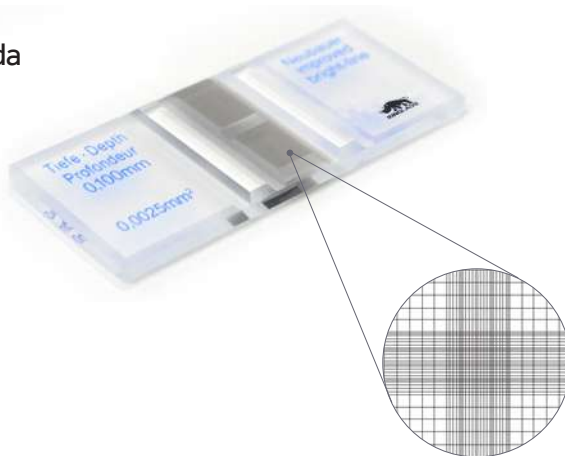

CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE OG



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO


Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

CÂMARA DE FUCHS ROSENTHAL

É frequentemente usada para contagem de células no líquor e análises em sangue para contagem de leucócitos.

OG-500

Modelo:	OG-500
Fabricação	Vidro óptico especial
Divisões	Gravadas no revestimento
Quadriculado	0,0625mm ²
Profundidade	0,2mm

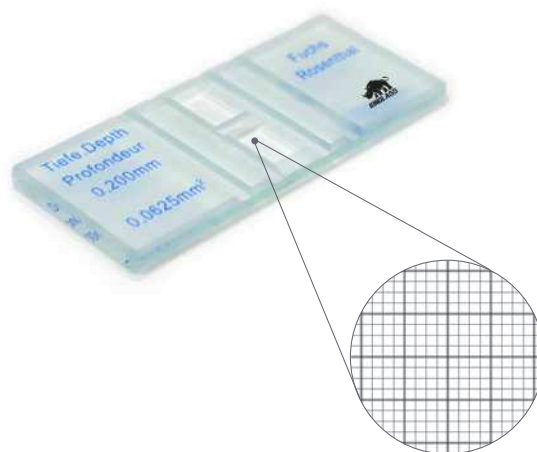


CÂMARA DE THOMA

Câmara específica para contagem de eritrócitos e trombócitos. Possui marcação em 01 (quadrante central em vermelho) de 1mm² subdividido em 16 quadrantes médios por linhas triplas.

OG-700

Modelo:	OG-700
Fabricação	Vidro óptico especial
Divisões	Gravadas no revestimento
Quadriculado	0,0025mm ²
Profundidade	0,1mm

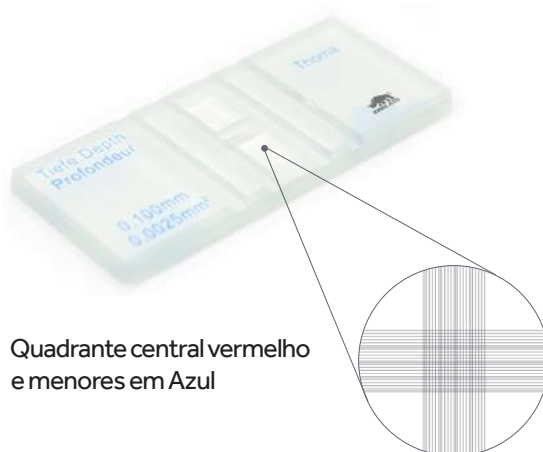

Quadrante central vermelho e menores em Azul

CÂMARA DE NAGEOTTE ESPELHADA

Permitem a contagem manual de baixas concentrações de leucócitos, abaixo da capacidade dos hemocitômetros padrão.


As câmaras de Nageotte podem mensurar precisamente até 0,1 célula/ μ L (100 células/mL)

OG-600

Modelo:	OG-600
Fabricação	Vidro óptico especial
Tipo	Dupla
Volume	50 microlitros por campo
Profundidade	0,5mm
Embalagem	Individualmente em caixa plástica



Quadrante central vermelho e menores em Azul

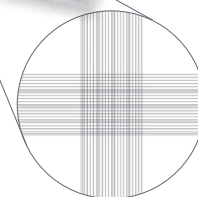

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

